



ELECTRIC JADE STONE / SKIN MASSAGER

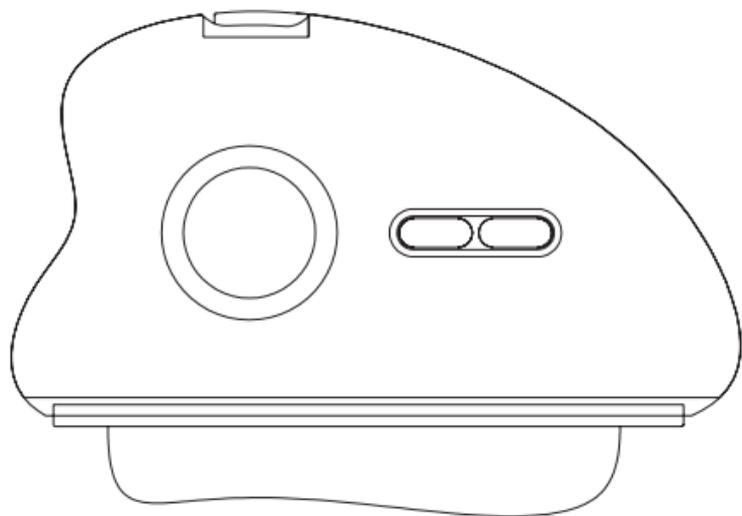

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTAUFBAU

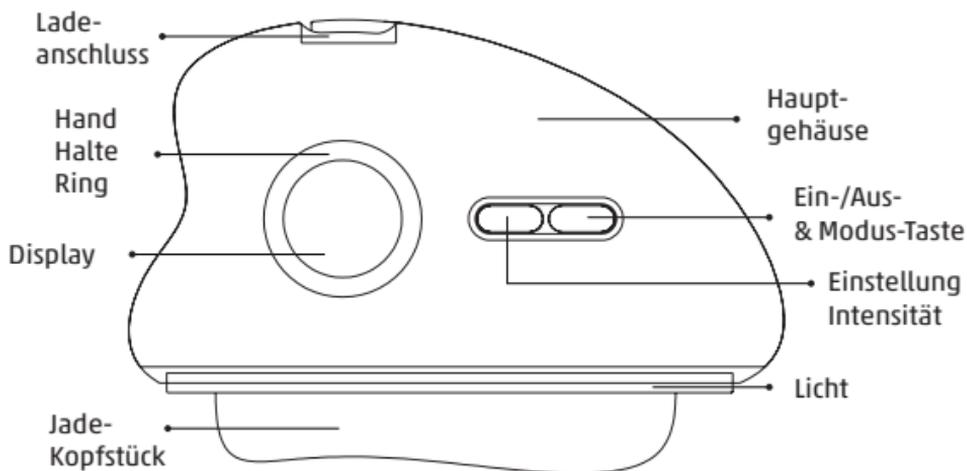

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen: Länge: 100mm x 71mm x 25mm

Produktgewicht: 80g

Betriebsspannung: DC3.7V

Arbeitsstrom: 450-550mA

Heiztemperatur: 40-50 °C

Nennleistung: 2W

Aufladezeit: 2 Stunden

Kontinuierliche Betriebszeit: 1 Stunde

Batteriekapazität: 500MAH

Material: ABS+Jade

PRODUKTMERKMALE

1. Wärmende Jade-Massage; Jade wärmt die Haut und entspannt die Meridiane.
2. Drei Temperaturstufen verfügbar, geeignet für alle Hauttypen.
3. Schwarz-Weiss-Display; einfach, intuitiv und augenschonend.
4. Zur Behandlungsergänzung; Rotes, blaues und violettes Licht.

Hauptfunktionen des Geräts:

WÄRME- MASSAGE

Jade-Massagekopf im Wärme-Massage-Modus mit konstanter Temperatur: Befeuchtet, verschönert und pflegt die Haut, fördert die Durchblutung und sorgt für eine entspannende Massage. Er löst Hautverspannungen, reduziert Druck und fördert die Muskelentspannung sowie die Aktivierung der Kollateralen.

VIBRATIONS- MASSAGE

Der Jade-Massagekopf verwendet hochfrequente Mikrovibrationen mit einer Frequenz von 5200 Schwingungen pro Sekunde, um sanfte Haut- und Muskelstimulationen zu erzeugen, die eine entspannende Massage fördern.

LICHT- BEHANDLUNG (PHOTON)

Die Wellenlänge der Photonen hat eine entsprechende Wirkung auf das Hautgewebe. Photonen verbessern die Hautreparatur, beschleunigen die Proteinsynthese, stimulieren die Kollagenregeneration, erhöhen den Kollagengehalt und beschleunigen den Fibroblastenstoffwechsel durch lokale Bestrahlung. Sie fördern die Zellregeneration und -heilung, verbessern die zelluläre Immunfunktion und tragen zur Beseitigung von Entzündungen bei.

Lichtwellen für die Pflege je nach Hauttyp:

Rotes Licht (620 nm ± 10 nm): Fördert die Elastizität der Haut, verkleinert die Poren, bekämpft Falten und sorgt für eine zarte Haut.

Blaues Licht (465 nm ± 10 nm): Wirkt sterilisierend und reduziert die Talgproduktion der Haut.

Violettes Licht (430 nm ± 10 nm): Unterstützt das Eindringen von Wirkstoffen und Flüssigkeiten, sterilisiert und hilft effektiv, Akne und Hautunreinheiten zu lindern.

ANWENDUNG

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät über ausreichend Strom verfügt.



1. Tragen Sie nach der Reinigung der Haut die Hautpflegeprodukte auf die entsprechenden Stellen auf.



2. Drücken Sie die Ein-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Vibration beginnt, und das Jade-Kopfstück fängt an zu erwärmen. Jade-Kopf: Drücken Sie die Modus-Taste erneut, um zwischen den roten, blauen und violetten Farblichtmodi zu wechseln. Durch Drücken der Intensitätstaste (LEV) können Sie zwischen drei verschiedenen Temperaturstufen wählen. Die Stufe wird auf dem Display angezeigt. Wählen Sie den passenden Modus und die Intensität entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen.



3. Nachdem Sie den Modus gewählt haben, setzen Sie das Gerät an die entsprechende Stelle der Haut und schieben es langsam in Pfeilrichtung (in Richtung des natürlichen Lymphflusses), um die Behandlung durchzuführen.



4. Drücken Sie nach dem Gebrauch die Aus-Taste für einige Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch und stellen Sie es an einen trockenen, gut belüfteten Ort.

VORSICHTSHINWEISE

1. Um dieses Produkt besser nutzen zu können, laden Sie es bitte vor der ersten Verwendung auf. Das Produkt verwendet einen USB-C-Anschluss zum Aufladen.
2. Wenn der Stromverbrauch des Geräts niedrig ist, blinkt der Batteriestand auf dem Display und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Bitte laden Sie es rechtzeitig auf.
3. Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriestandsgitter auf dem Display zyklisch und leuchtet kontinuierlich, wenn es vollständig aufgeladen ist.
4. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 5 Minuten.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Hautgeschwüren, Empfindlichkeit oder Wunden.
6. Bitte lagern Sie das Produkt an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

GARANTIEKARTE

1. Die kostenlose Garantie dieser Garantiekarte beschränkt sich auf Fehler, die durch Produktions-, Technologie- und Qualitätsprobleme verursacht werden und die elektrische Leistung betreffen.
2. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Verkaufsdatum des Produkts und ist für zwei Jahre gültig.
3. Während der Garantiezeit tauscht das Unternehmen die defekten Teile kostenlos aus. Die Kosten für den Hin- und Rücktransport gehen zu Lasten des Kunden.
4. Im Falle eines vom Menschen verursachten Schadens trägt der Kunde die Kosten für die Reparaturteile sowie die Kosten für den Hin- und Rücktransport.
5. Der Garantieschein muss in Druckbuchstaben und mit deutlicher Handschrift ausgefüllt werden und darf nicht verändert werden. Bitte bewahren Sie ihn sorgfältig auf. Bei Verlust wird er nicht neu ausgestellt.

Product name		Product model	
User name		Contact number	
Purchase date		Purchase method	
User address			
Maintenance record			

Model: ME-S2402A

Batch number: 20250508

Manufacturer: Shenzhen Mebao
Intelligent Technology Co.,Ltd

Country of origin: Made in China

