



ELECTRIC JADE STONE / SKIN MASSAGER

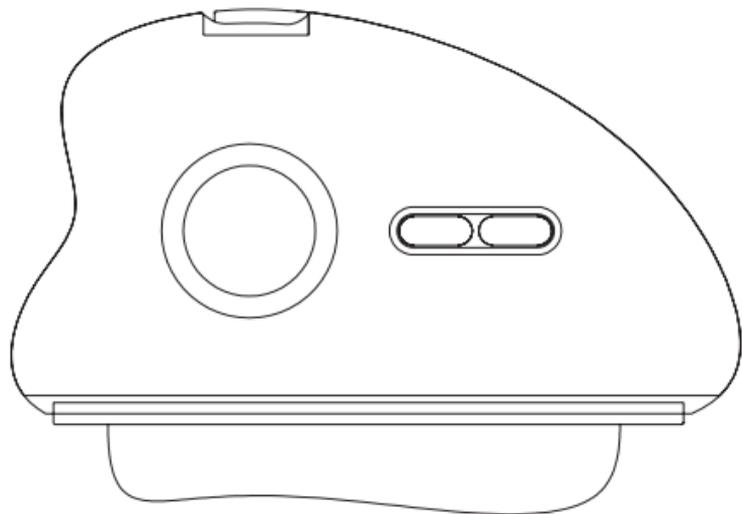

MODE D'EMPLOI

CONSTRUCTION DU PRODUIT

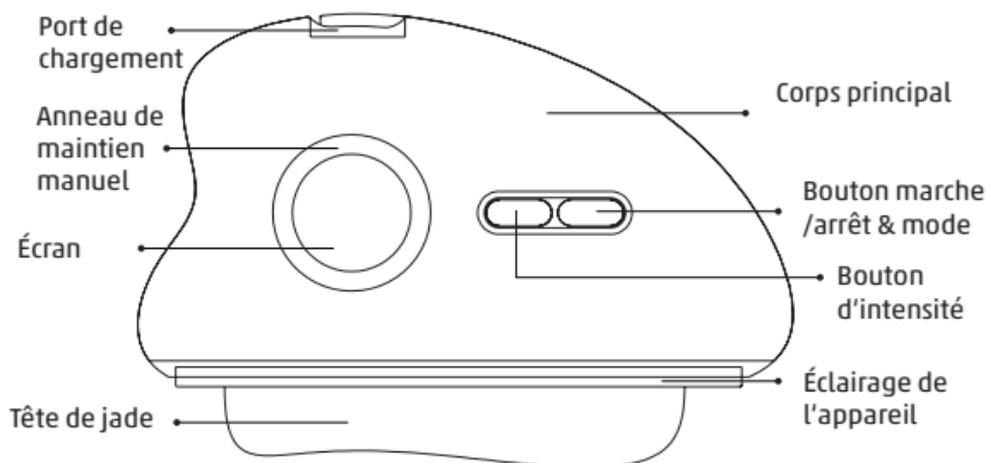

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions : Longueur : 100mm x 71mm x 25mm

Poids du produit : 80g

Tension de fonctionnement : DC3.7V

Courant de travail : 450-550mA

Température de chauffage : 40-50 °C

Puissance nominale : 2W

Temps de recharge : 2 heures

Temps de fonctionnement continu : 1 heure

Capacité de la batterie : 500MAH

Matériel : ABS+Jade

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Massage chauffant au jade ; le jade réchauffe la peau et détend les méridiens.
2. Trois niveaux de température disponibles ; convient à tous les types de peau.
3. Écran noir et blanc ; simple, intuitif et sans danger pour les yeux.
4. Pour compléter le traitement ; lumière rouge, bleue et violette.

Principales fonctions de l'appareil:

MASSAGE THERMIQUE

Tête de massage en jade en mode chaleur-massage à température constante : hydrate, embellit et soigne la peau, favorise la circulation sanguine et procure un massage relaxant. Il soulage les tensions cutanées, réduit la pression et favorise la détente musculaire ainsi que l'activation des collatérales.

MASSAGE PAR VIBRATIONS

La tête de massage en jade utilise des micro-vibrations à haute fréquence, soit 5200 oscillations par seconde, pour produire une douce stimulation de la peau et des muscles, favorisant ainsi un massage relaxant.

LUMIÈRE-TRAITEMENT (PHOTON)

La longueur d'onde des photons a un effet correspondant sur le tissu cutané. Les photons améliorent la réparation de la peau, accélèrent la synthèse des protéines, stimulent la régénération du collagène, augmentent la teneur en collagène et accélèrent le métabolisme des fibroblastes par irradiation locale. Ils favorisent la régénération et la cicatrisation des cellules, améliorent la fonction immunitaire cellulaire et contribuent à l'élimination des inflammations.

Ondes lumineuses pour les soins selon le type de peau :

Lumière rouge (620 nm \pm 10 nm) : Favorise l'élasticité de la peau, resserre les pores, lutte contre les rides et rend la peau plus douce.

Lumière bleue (465 nm \pm 10 nm) : A un effet stérilisant et réduit la production de sébum de la peau.

Lumière violette (430 nm \pm 10 nm) : Favorise la pénétration des substances actives et des liquides, stérilise et aide à soulager efficacement l'acné et les impuretés de la peau.

APPLICATION

Avant de mettre l'appareil en service, assurez-vous qu'il dispose de suffisamment de courant.



1. Après avoir nettoyé la peau, appliquez les produits de soin de la peau sur les zones concernées.



2. Appuyez sur le bouton marche pour mettre l'appareil en marche. La vibration commence et la tête de jade commence à chauffer. Tête en jade : appuyez à nouveau sur le bouton de mode pour basculer entre les modes de lumière colorée rouge, bleue et violette. En appuyant sur le bouton d'intensité (LEV), vous pouvez choisir entre trois niveaux de température différents. Le niveau s'affiche sur l'écran. Choisissez le mode et l'intensité qui vous conviennent en fonction de vos besoins personnels.



3. Après avoir sélectionné le mode, placez l'appareil sur la zone concernée de la peau et faites-le glisser lentement dans le sens de la flèche (dans la direction du flux lymphatique naturel) pour effectuer le traitement.



4. Après utilisation, appuyez sur le bouton d'arrêt pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre et placez-le dans un endroit sec et bien ventilé.

CONSEILS DE PRUDENCE

1. Pour une meilleure utilisation de ce produit, veuillez le charger avant la première utilisation. Le produit utilise un port USB-C pour la recharge.
2. Lorsque la consommation d'énergie de l'appareil est faible, le niveau de la batterie clignote sur l'écran et l'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez le recharger à temps.
3. Pendant le chargement, la grille du niveau de la batterie clignote de manière cyclique sur l'écran et s'allume en continu lorsqu'elle est complètement chargée.
4. L'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique après 5 minutes.
5. N'utilisez pas l'appareil en cas d'ulcères cutanés, de sensibilité ou de plaies.
6. Veuillez stocker le produit dans un endroit bien ventilé et sec.

CARTE DE GARANTIE

1. La garantie gratuite de cette carte de garantie est limitée à la défaillance des performances électriques causée par des problèmes de production, de technologie et de qualité.
2. La période de garantie est deux ans. Elle prend effet à compter de la date de vente du produit et est valable pendant deux ans.
3. Pendant la période de garantie, l'entreprise remplacera gratuitement les pièces défectueuses, les frais de transport aller-retour étant à la charge du client.
4. En cas de dommages causés par l'homme, le client doit payer le coût des pièces de rechange et les frais de transport aller-retour.
5. La carte de garantie doit être remplie en caractères d'imprimerie, en écriture claire et ne doit pas être modifiée. Veuillez la conserver correctement. En cas de perte, elle ne sera pas rééditée.

Product name		Product model	
User name		Contact number	
Purchase date		Purchase method	
User address			
Maintenance record			

Model: ME-S2402A

Batch number: 20250508

Manufacturer: Shenzhen Mebao
Intelligent Technology Co.,Ltd

Country of origin: Made in China

